



はなまる イチオシ 商品情報



Taica Wellness

立ち上がりサポートマットレス／体圧分散式マットレス

αPLA **すくっと** **Active**

PT (理学療法士) **OT** (作業療法士) が考えたマットレス

動きやすさに加え、端座位からの
立ち上がり動作を補助する機能をプラス
体圧分散性能も兼ね備えた
リバーシブルマットレス



レンタル料金

3,000

円

ご利用者負担額 (1割負担時)

300

円

※画像はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

※2 通気力パータイプのみ。 ※3 全面防水フィルムカパータイプのみ。

αPLA は株式会社タイカの登録商標です。

「動き」に寄り添い、

日常にリハビリを自然に組み込む、

そんな願いを込めました。

Soft面

沈み込みが大き過ぎるマットレスは、沈み込んだ箇所に荷重が集中し、結果として体圧値が高くなる傾向があります。アルファプラ すくっとアクティブのソフト面は、沈み込み量を適切にコントロールすることで、高い体圧分散性能を有しています。

Hard面

多くの理学療法士・作業療法士の意見を参考に仰臥位から端座位、端座位から立位などの一連の姿勢変換に伴う重心移動が滞らかに

体圧分散性能

■体圧分散比較


アルファプラ すくっとアクティブソフト面（体圧値：132）（単位：mmHg）



アルファプラ すくっとアクティブハード面（体圧値：152）（単位：mmHg）




一般用マットレス（体圧値：172）（単位：mmHg）

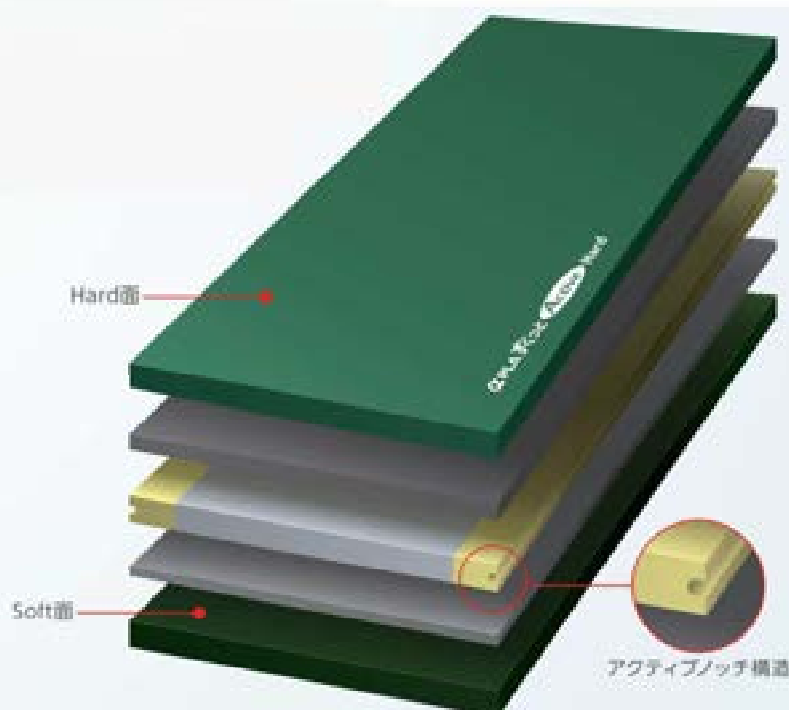

立ち上がり動作補助

アルファプラ すくっとアクティブ両端の「アクティブノッチ構造」が端座位から立ち上がるきっかけを補助し、立ち上がりをサポートします。

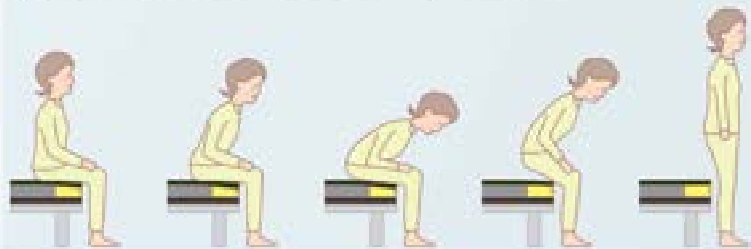

製品スペック

アルファプラ すくっとアクティブ

○通気カバータイプ

型番:TS-SKT-AcA1R

サイズ:幅91×長191×厚10

TAISコード:00563-000199

重量:6.9kg

○防水フィルムカバータイプ

型番:TS-SKT-AcZ1R

サイズ:幅91×長191×厚10

TAISコード:00563-000203

重量:6.6kg

お問い合わせ先

はなまるレンタルサービス ＊福祉用具貸与・販売 ＊住宅改修

本社

大阪府枚方市田口1-19-3

072-805-0870

宇治支店

京都府宇治市伊勢田町中山27-3

0774-46-9034

寝屋川支店

大阪府寝屋川市仁和寺本町4-11-13

072-813-0871



Taica Wellness

株式会社タイカ ウェルネス事業本部

〒125-0054 東京都葛飾区高砂5-39-4

TEL:03-5648-6630 FAX:03-5648-6640

<https://taica.co.jp/pla/>

フリーダイヤル

0120-152047



Ac R-A-01
2025.11.5000